



iClick™ EU Andy Fluor 594 Imaging Kit

——EU 法细胞增殖（细胞成像）检测试剂盒

产品货号	包装规格
A010	250 次

储存条件：-20℃，避光保存。

激发/发射波长：Andy Fluor 594 azide: 590/615 nm; Hoechst 33342: 350/461 nm。

产品说明书

GeneCopoeia, Inc. 广州易锦生物技术有限公司

广州高新技术产业开发区广州科学城

掬泉路 3 号广州国际企业孵化器 F 区 8 楼

邮编：510663

电话：4006-020-200

邮箱：sales@igenebio.com

网址：www.abpbio.com www.igenebio.com

© 2016 GeneCopoeia, Inc.

iClick™ EU Andy Fluor 594 Imaging Kit

产品货号: A010

试剂盒组份:

组份	试剂名称	包装	浓度	储存条件
组份 A	EU	500 µl	100 mM in DMSO	-20℃
组份 B	Andy Fluor 594 azide	100 µl	NA	-20℃, 避光保存
组份 C	iClick EU reaction buffer	50 ml	1×	2~8℃
组份 D	CuSO₄	1 ml	10 mM in H ₂ O	-20℃
组份 E	iClick EU buffer additive	200 mg	NA	-20℃
组份 F	Hoechst 33342	70 µl	5 mg/ml in H ₂ O	-20℃

注: 按照推荐的储存条件保存有效期为 1 年, 请注意避免反复冻融。

产品介绍

直接测定 RNA 合成及 RNA 水平的变化是测定物质毒性、评估药物安全评价、细胞健康的基本方法。EU 法细胞增殖 (细胞成像) 检测试剂盒采用一种尿嘧啶核苷类似物-EU (5-乙炔基-尿嘧啶核苷), 能够在 RNA 转录时期代替尿嘧啶 (U) 掺入正在合成的 RNA 分子, 利用 EU 与染料之间的点击化学 (Click Chemistry) 反应可以在体内和体外水平检测时间和空间上 RNA 合成的变化, 能够更方便地研究 RNA 转录位点, 结合相关抗体标记能够检测与 RNA 有相互作用的蛋白。结合 EdU 和 EU 进行检测新合成的 DNA 和新合成的 RNA, 可以深入开展细胞增殖、细胞周期、细胞毒性、DNA 复制及修复、信号通路等方面的研究。


注意事项

- 荧光染料均存在淬灭问题, 请尽量注意避光, 以减缓荧光淬灭。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

实验所需耗材 (不包含在试剂盒中)

- 1×PBS (pH 7.2~7.6)
- 细胞固定液 (含 3.7% 甲醛的 PBS)
- 细胞透膜液 (含 0.5% Triton® X-100 的 PBS)
- 含 3% BSA 的 PBS (pH 7.4)
- 去离子水
- 18×18 mm 盖玻片

EU 法细胞增殖（细胞成像）检测实验流程

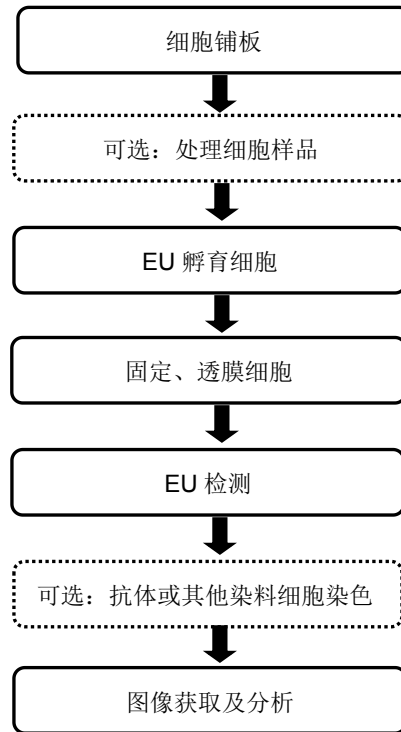

实验步骤

1. EU 标记

注意：EU 标记的最佳浓度根据细胞类型而变化。建议使用 EU 的起始浓度为 100 μM 。细胞培养基，细胞浓度，细胞类型及其它因素都可能影响标记 EU 标记效率。所以，在进行初始实验时，要先根据自身的细胞类型和实验条件，选用几组不同的 EU 浓度来确定最佳的 EU 浓度。

1.1 以合适的细胞浓度，将细胞铺到盖玻片上，将细胞培养过夜至正常生长阶段。

1.2 （可选）对细胞按实验设计进行处理。

1.3 制备 2 \times EU 工作液。用细胞培养基按一定比例稀释 EU 溶液（组份 A）。建议使用 100 μM EU 初始浓度。

1.4 预热 2 \times EU 工作液到 37 $^{\circ}\text{C}$ ，往含培养基的细胞中加入等体积的 2 \times EU 工作液。例如实验选用 EU 的终浓度为 100 μM ，配置 200 μM EU 工作液并用 200 μM EU 工作液取代一半的细胞培养基。我们不建议去除所有的细胞培养基，然后加入 1 \times EU 工作液。因为这样操作会影响细胞正常生长。

1.5 根据细胞类型孵育一段时间，最佳孵育时间与细胞周期相关，大多数肿瘤细胞

可采用 2 小时孵育时间。不同细胞类型的孵育时间可参考如下表 1。

表 1: EU 孵育时间参考表

细胞类型	人胚胎细胞	酵母细胞	人成纤维细胞	人宫颈癌细胞	人胚肾细胞	人神经细胞
细胞周期	~30 min	~3 h	~18 h	~21 h	~25 h	~5 d
孵育时间	5 min	20 min	2 h	2 h	2h	1 d

2. 细胞固定、透膜处理

注意: 本实验操作采用含 3.7% 甲醛的 PBS 进行细胞固定, 含 0.5% Triton X-100 的 PBS 进行细胞透膜处理。但是, 其它的细胞固定及透膜方法比如甲醇、皂素等同样适用于本实验操作。

2.1 移除细胞培养液, 往含盖玻片的多孔板里每孔加入 1 ml 细胞固定液 (含 3.7% 甲醛的 PBS), 室温孵育 15 分钟。

2.2 移除细胞固定液, 每孔加入 1 ml 含 3% BSA 的 PBS 清洗细胞 5 分钟, 重复一次。

2.3 移除细胞清洗液, 每孔加入 1 ml 细胞透膜液 (含 0.5% Triton X-100 的 PBS), 室温孵育 20 分钟。

3. EU 检测

注意: 本实验操作采用 100 μ l iClick 反应液体系, 也可按实际需求使用更大或更小体积的 iClick 反应液体系, 但须保证配置的反应液中各试剂组份保持同一个比例。

3.1 配制 10 \times iClick EU 缓冲添加剂。取试剂盒组份 E, 加入 1ml 去离子水, 颠倒混匀直到溶质完全溶解。使用后建议储存剩余的缓冲添加剂于 -20 $^{\circ}$ C 或更低温度, 可以稳定保存至少 1 年以上。如果溶液变成棕黄色, 说明该试剂发生降解, 则需更换。

3.2 配制 1 \times iClick EU 缓冲添加剂。用去离子水做 10 倍稀释 10 \times iClick EU 缓冲添加剂。现用现配。

3.3 配制 1 \times iClick 反应液体系, 按照如下表 2 的顺序依次配制, 否则无法达到最佳的使用效果。注意反应液体系需在 15 分钟之内使用。

表 2: 1 \times iClick 反应液体系配制参考

试剂	盖玻片数量			
	5	10	20	50
iClick EU reaction buffer (组份 C)	430 μ l	860 μ l	1.8 ml	4.3 ml
CuSO ₄ (组份 D)	20 μ l	40 μ l	80 μ l	200 μ l
Andy Fluor 594 azide (组份 B)	1.5 μ l	3 μ l	6 μ l	15 μ l
1 \times iClick EU 缓冲添加剂 (步骤 3.2)	50 μ l	100 μ l	200 μ l	500 μ l
总体积	500 μ l	1 ml	2 ml	5 ml

3.4 移除细胞透膜液, 每孔加入 1 ml 含 3% BSA 的 PBS 清洗细胞 5 分钟, 重复一

次。移除细胞清洗液。

3.5 每孔加入 100 μ l iClick 反应液。确保 iClick 反应液均匀覆盖整个盖玻片。

3.6 室温孵育 30 分钟，注意避光。

3.7 移除 iClick 反应液，每孔加入 1 ml 含 3% BSA 的 PBS 清洗细胞 5 分钟，重复 1~2 次。移除细胞清洗液。

注意：某些细胞对染料的吸附性较强，会导致较高的背景信号，为降低染料背景信号，可采用甲醇清洗 1~2 次，每次 5 分钟。然后用含 3% BSA 的 PBS 清洗 5 分钟。

如需做细胞核复染，请按 **DNA 染色** 步骤操作。如不需要额外的染色，即可将上述盖玻片封片后直接在荧光显微镜观察及成像分析。

4. DNA 染色

4.1 每孔加入 1 ml PBS 清洗细胞，移除细胞清洗液。

4.2 配置 1 \times Hoechst 33342 染色液。取出试剂盒组份试剂 F，使用 PBS 按 1:1000 比例稀释。1 \times Hoechst 33342 染色液的终浓度为 5 μ g/ml。

4.3 每孔加入 200 μ l 1 \times Hoechst 33342 染色液。室温孵育 15 分钟，注意避光。移除 Hoechst 33342 染色液。

4.4 每孔加入 1 ml PBS 清洗细胞 5 分钟，重复一次。移除细胞清洗液。

5. 成像及分析

将盖玻片晾干后，用封闭液在载玻片上封片，盖玻片四周用指甲油密封。根据如下表 3 染料的荧光激发和发射波长选择合适的激发光源和滤光片，荧光显微镜观察。

表 3：荧光染料激发/发射波长

荧光探针	激发波长 (nm)	发射波长 (nm)
Andy Fluor 594 azide	590	615
Hoechst 33342	350	461

实验案例

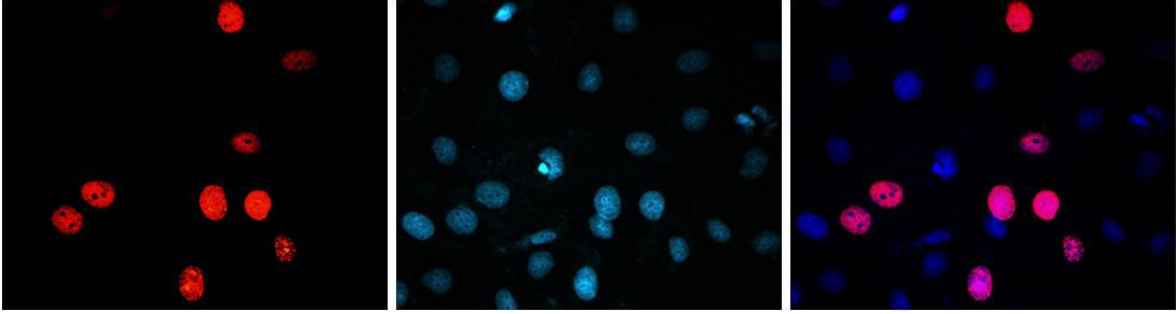


图 1. iClick™ EU Andy Fluor 594 细胞增殖检测试剂盒检测 A549 细胞增殖的细胞成像分析结果图。

使用 100 μ M EU 处理 A549 细胞 2 小时，然后使用 Andy Fluor™ 594 Azide（红色荧光）进行点击化学反应检测细胞增殖情况，Hoechst 33342（蓝色荧光）进行细胞核复染。

VIII. 使用许可与质量保证

使用限制

以下条款适用于 iClick™ EU Andy Fluor 594 Imaging Kit 产品。若您不能接受这些条款，请在 5 个自然日内将产品完整退还给 GeneCopoeia。产品购买者需遵守最终用户限制许可条例。本产品仅限购买者内部研究使用，不得用于人体或诊断、治疗。未经 GeneCopoeia 事先书面同意，本产品不得转售，不得重新包装或修改后转售，不得用于生产商用产品。

质量保证

GeneCopoeia 保证产品与产品数据表中描述的规格保持一致。若经 GeneCopoeia 证实产品未达到规格要求，GeneCopoeia 将为您替换产品。若无法替换，GeneCopoeia 将退款给购买者。此质量保证仅适用于最初产品购买者。GeneCopoeia 仅负责替换产品或退还实际的购买金额。对于由使用或不正确使用产品产生的损害或使用其他相关材料和试剂产生的损耗，GeneCopoeia 不承担责任。GeneCopoeia 不提供任何形式的明示的或者默示的保证，包括对适销性、适用于特定用途的默示保证。

GeneCopoeia 致力于为消费者提供高质量的研究产品。如果您对 GeneCopoeia 的产品有任何问题或疑虑，请拨打电话 4006-020-200 联系我们。

© 2016, GeneCopoeia, Inc

GeneCopoeia, Inc.
9620 Medical Center Drive
Rockville, MD 20850
Tel: 301-762-0888 Fax: 301-762-3888
Email: inquiry@genecopoeia.com
Web: www.genecopoeia.com

广州易锦生物技术有限公司
广州高新技术产业开发区广州科学城掬泉路 3 号
广州国际企业孵化器 F 区 8 楼
邮编: 510663
电话: 4006-020-200
邮箱: sales@igenebio.com
网址: www.genecopoeia.com (英文) www.igenebio.com (中文)