

BlazeTaq™ SYBR® Green mRNA qPCR 系列

• 高灵敏度，高特异性

• 抗体修饰法 mRNA qPCR 试剂



买一 赠一

活动时间：2019年9月1日 - 11月30日

GeneCopoeia 推出 BlazeTaq™ 系列 SYBR® Green mRNA qPCR 试剂，包括适用于一步法的 BlazeTaq™ One-Step SYBR Green RT-qPCR Kit 和 适用于两步法的 BlazeTaq™ SYBR Green qPCR Mix 2.0。

- 灵敏度高：可检测低至 5 个拷贝数的 DNA 模板；可从低至 0.1 pg 的 RNA 提取物中精确检测目标 RNA。
- 特异性强：抗体修饰热启动 DNA 聚合酶，更有效抑制引物二聚体以及非特异性扩增的产生
- 扩增效率高：在宽广的 GC 含量范围内能维持高扩增效率
- 适用性广：提供带有或不带有 ROX 的两个版本可选，且与大多数荧光定量 PCR 仪兼容

BlazeTaq™ SYBR® Green qPCR mix 2.0

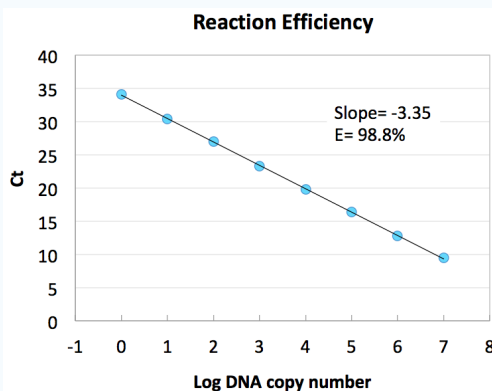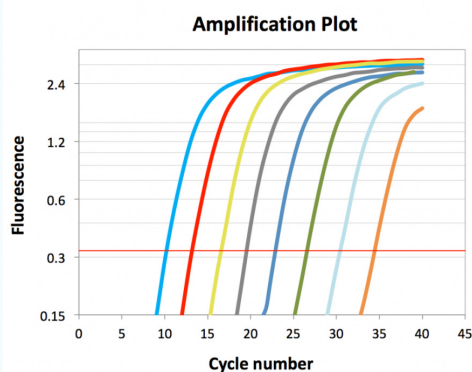


扫码查看产品详情

图 1. BlazeTaq™ SYBR® Green qPCR mix 2.0 显示出高灵敏度的特性，且在宽广的定量范围内具有优异的线性相关性。（扩增 8 个 10 倍梯度稀释的双链 DNA 片段，DNA 拷贝数范围为 $5 \times 10^7 \sim 5$ 个拷贝。）

BlazeTaq™ One-Step SYBR® Green RT-qPCR kit




扫码查看产品详情

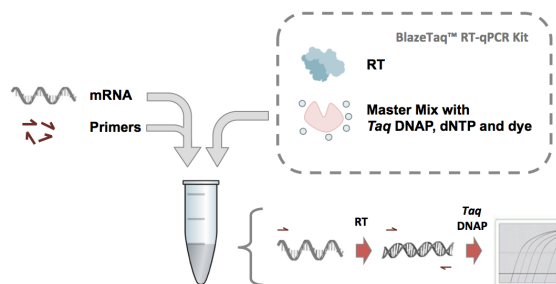

RT-qPCR 实验简图


两步法 RT-qPCR 反应

RNA → SureScript™ First-Strand cDNA Synthesis Kit → cDNA → BlazeTaq™ SYBR Green qPCR Mix2.0 & All-in-One™ qPCR Primers

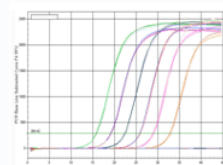

一步法 RT-qPCR 反应

RNA → BlazeTaq™ One-Step SYBR Green RT-qPCR Kit & All-in-One™ qPCR Primers

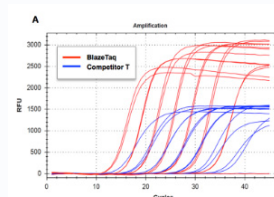

BlazeTaq™ 系列产品列表 买一赠一

产品名称	货号	规格	目录价
BlazeTaq™ SYBR® Green qPCR mix 2.0 (withROX)	QP031 QP032 QP033	200/600/1200 rxns	¥ 555 起
BlazeTaq™ SYBR® Green qPCR mix 2.0 (without ROX)	QP041 QP042 QP043	200/600/1200 rxns	¥ 555 起
BlazeTaq™ One-Step SYBR® Green RT-qPCR Kit (withROX)	QP071 QP072 QP073	200/600/1200 rxns	¥ 1498 起
BlazeTaq™ One-Step SYBR® Green RT-qPCR Kit (without ROX)	QP081 QP082 QP083	200/600/1200 rxns	¥ 1498 起

* 另外，我们还提供探针法 RT-qPCR 试剂 BlazeTaq Probe One-Step RT-qPCR Kit (QP076 或 QP086) 和 BlazeTaq Probe qPCR Mix (QP036 和 QP046)

配套产品列表

产品名称	货号	规格	目录价	优惠
SureScript™ First-Strand cDNA Synthesis Kit	QP056 QP057	20/60 rxns	¥ 360 起	买一赠一

验证引物

- ◆ 10000+ 条人、小鼠、大鼠编码基因验证引物
- ◆ 大量SCI 文献引用

产品名称	产品描述	产品货号	规格	目录价	优惠价
All-in-One™ mRNA qPCR 内参引物	mRNA内参引物	各异，官网可查	20 μL×100 rxns	¥ 100	¥ 60
All-in-One™ mRNA qPCR Primer	mRNA验证引物		20 μL×100 rxns	¥ 200	¥ 120



扫一扫，关注官方微信